


REINIGING - PRE-DESINFECTIEMIDDEL
MEDISCH HULPMIDDEL
KLASSE IIb



UMONIUM³⁸ STERILY

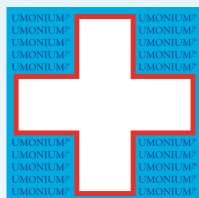

✓ FORMULE ZONDER

- CMR-COMPONENT**
- HORMOONONTREGELAAR

“ Nummer 1 in
sterilisatie-installaties ”



Geen enzymen of alkaline producten nodig om een stralend schone instrumentatie te garanderen. **UMONIUM³⁸ STERILY** verwijdert in een eerste stap het vuil en laat geen geelbruine afzetting achter op de assen van de tangen en reinigt de instrumentatie diepgaand door onderdompeling in een ultrasonbad en/of met borstelen met de hand. Veilig voor de gebruiker en beschermt deze tegen een besmettingsrisico. De oplossing is zonder gevaar in geval van spatten, niet-corrosief, veroorzaakt geen toxische dampen en bevat geen eiwitbindende stoffen. Het materiaal is glanzend schoon en de afvoerleidingen zijn vrij van kleverig afval.

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch





UMONIUM³⁸ STERILY

1 l concentraat geeft 200L
verdunde oplossing (0,5%).



✓ **FORMULE ZONDER**
→ CMR-COMPONENT**
→ HORMOONONTREGELAAR

INDICATIES

Reiniging en pre-desinfectie van
invasieve medische hulpmiddelen vóór
sterilisatie. Bereidt de desinfectie voor.

SAMENSTELLING

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-
ammonium chloride/N-benzyl-N,
N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium
chloride. 22g/l.

NORMATIEVE STANDAARDEN

- In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (bijlage II, excl. §4)
- Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.
- CE-markering 1639


GEBRUIKSAANWIJZING

Een oplossing van 0,5% (25 ml/5 l water*) gebruiken. Onderdompelen en vervolgens borstelen/een ultrasoonbad gebruiken om alle vuil te verwijderen. Grondig spoelen met water* vóór de desinfectie.

EIGENSCHAPPEN

- Medisch hulpmiddel Klasse IIb
- Pre-desinfecterend reinigingsmiddel aan 0,5%
- Niet toxisch, geen gevaarlijke dampen
- LD₅₀ (rat): 5840 mg/kg
- Niet corrosief: pH-neutraal
- Irriteert de huid niet (geen transdermale toxiciteit)
- Zonder aldehyde, peroxyde, biguanide of andere carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen
- Stolt niet
- Niet ontvlambaar
- 100% compatibel met optische vezel, rubber, polycarbonaat, acrylstoffen, glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verven, roestvrij staal 410
- Doeltreffend, snel en krachtig (lost bloed op)
- Doeltreffend in aanwezigheid van organische materialen
- Werkt sneller dan enzymoplossingen
- Zonder residu na spoeling
- Stabiliteit: 36 maanden na productiedatum

GEBRUIKSPROCEDURE

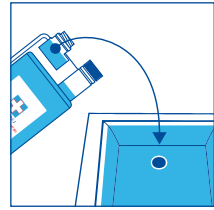

Een oplossing van 0,5% (25 ml/5 l water*) gebruiken
→ Een bad per gebruik



Onderdompelen en vervolgens borstelen/
een ultrasoonbad gebruiken om alle vuil
te verwijderen



Grondig spoelen met water*
vóór de desinfectie



ARTIKELNR.	BENAMING	DOOS
PF 10325	Easydose 25 ml	2 x 50 stuk
PF 10320	Doseerflacon 1 liter	12 x 1 liter
PF 10322	Bidon van 5 liter met pomp	4 x 5 liter
PF 10324	Doseerflacon 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	Pomp ECONOMATIC volledige set - Dosering 0,5%	1 stuk

* Kraanwater op kamertemperatuur

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch